

A. ESSAYAGE



Retirer la restauration provisoire et nettoyer soigneusement.

1



Vérifier l'ajustage et l'occlusion. Si nécessaire, utiliser une G-CEM Try-in Paste.

2



Retirer la restauration et rincer à l'eau.

3

B. PREPARATION DE LA RESTAURATION

Préparer la restauration selon les instructions du fabricant

>> Céramique vitreuse



Mordancer à l'acide fluorhydrique

1



Rincer et sécher.

2



Appliquer G-Multi PRIMER

3

>> Céramiques hybride & composite



Sabler*

1



Souffler avec une seringue à air. Rincer et sécher.

2



Sécher avec une seringue à air.

4

C. PREPARATION DE LA SURFACE DE LA DENT



Rincer et sécher la dent préparée.

1



Sélectionner la technique mordantage sélectif ou mordantage total. Rincer et sécher.

2



Appliquer G-Premio BOND. Laisser agir 10 secondes.

3



Sécher sous PRESSION D'AIR MAXIMUM pendant 5 secondes.

4



Photopolymériser 10 secondes (Halogène/LED 700mW/cm²).

5

D. COLLAGE



Extraire G-CEM Veneer directement dans l'intrados de la restauration.

1



Positionner aussitôt sur la dent préparée. Maintenir une pression modérée.

2



Retirer les excès avec un pinceau ou un instrument. Les excès peuvent être aisément retirés après 1-2 sec de photopolymérisation (tack cure).

3



Photopolymériser chaque surface/joint pendant 20 secondes (Halogène/LED 700mW/cm²).

4



Finir et polir les joints.

5

► Retrouvez tous nos step by step concernant le collage sur notre GC Luting Guide



Télécharger dans l'App Store



GET IT ON Google Play



GC

G-CEM™ Veneer GUIDE TECHNIQUE

TECHNIQUE DE COLLAGE POUR INLAY/ONLAY

A. ESSAYAGE



Retirer la restauration provisoire et nettoyer soigneusement.

1



Vérifier l'ajustage et l'occlusion. Si nécessaire, utiliser une G-CEM Try-in Paste.

2



Retirer la restauration et rincer à l'eau.

3

B. PREPARATION DE LA RESTAURATION

Préparer la restauration selon les instructions du fabricant

>> Céramique vitreuse



Mordancer à l'acide fluorhydrique.

1



Rincer et sécher.

2



Appliquer G-Multi PRIMER.

3

>> Céramiques hybride & composite



Sabler*.

1



Souffler avec une seringue à air. Rincer et sécher.

2



Sécher avec une seringue à air.

4

C. PREPARATION DE LA SURFACE DE LA DENT



Rincer et sécher la dent préparée.

1



Sélectionner la technique de mordantage sélectif ou mordantage total. Rincer et sécher.

2



Appliquer G-Premio BOND. Laisser agir 10 secondes.

3



Sécher sous PRESSION D'AIR MAXIMUM pendant 5 secondes.

4



Photopolymériser 10 secondes (Halogène/LED 700mW/cm²)

5

D. COLLAGE



Appliquer la colle directement sur la surface de collage de l'onlay et/ou la surface de la dent.

1



Positionner aussitôt sur la dent préparée. Maintenir une pression modérée.

2



Retirer les excès avec un pinceau ou un instrument. Les excès peuvent être aisément retirés après 1-2 sec de photopolymérisation (tack cure)

3



Photopolymériser chaque surface/joint pendant 20 secondes (Halogène/LED 700mW/cm²)


4



Finir et polir les joints.

5

Contenu du Starter Kit

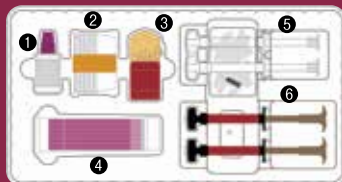

- 1 G-Multi PRIMER
- 2 Plateau jetable
- 3 G-Premio BOND
- 4 DISPOSABLE APPLICATOR II
- 5 G-CEM Try-In Paste
- 6 G-CEM Veneer

*ou, pour CERASMART, appliquer de l'acide fluorhydrique